

HEALTH MATE™ LDH

Detecta os
níveis elevados de
Lactato Desidrogenase
(LDH) no leite



ESPECIFICAÇÕES

Produto	HEALTH MATE™ LDH MILK (25/50 testes)
Item mensurável	Lactato desidrogenase (LDH)
Amostra	Aprox. 5mL de leite fresco
Método	Tiras colorimétricas - semiquantitativo
Tempo de reação	2 minutos
Armazenamento	2 a 25 °C por 18 meses

PROPÓSITO DO PRODUTO

Monitorar e detectar mastite pela presença de Lactato Desidrogenase (LDH), no leite.

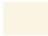




O QUE É LDH (lactato desidrogenase)?

A lactato desidrogenase (Nível de LDH) aumenta durante a infecção do úbere.

BENEFÍCIOS

- Detecta precocemente a mastite.
- Detecta a mastite antes do teste de células somáticas.
- Antecedência do tratamento e probabilidade de cura com menor gasto.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

U/L					
	0 Neg	100 +	200 ++	500 +++	2 minutos