


Componentes

Embalagem de alumínio



Tubos capilares de plástico descartáveis 20 µl

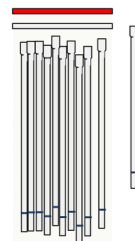


Dispositivo de detecção




Ajuste a temperatura para 60° C



Destaque a quantidade de tubos conforme amostras

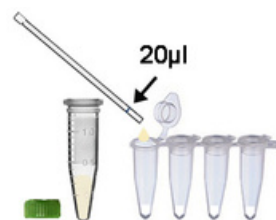

Deposite 20µl da amostra de DNA extraído

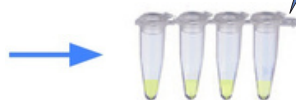

Incube em temperatura ambiente por 1 min

agitar o tubo para dissolver o pellet




**AQUECER A 60 °C
POR 25 MINUTOS**



Analise com o aparelho de detecção



O DNA extraído deve ser utilizado o mais breve possível, mas pode ser conservado por 24 horas a 4°C, por duas semanas a -20°C ou por um período mais prolongado a -70°C.

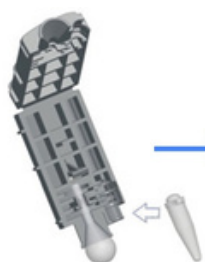

Coloque o tubo de reação no cartucho Amplicon



Feche o cartucho



Coloque o cartucho na câmara de detecção



Feche o dispositivo



Pressione até fechar

15 min



Leia os resultados



C linha controle
T linha teste

36QGU108 12/02/19